

やさしい仮封材できました。

においがいい
 身体にやさしい
 使い方がやさしい
 診療環境にやさしい
 仮封材できました。

Evadyne[®] Plus

光重合型仮封材

ワンペースタイルの操作性に加え、溶剤を使用しないことで、患者さんだけでなく診療環境へのやさしさも備えます。配合成分の改良により耐脱落性は弊社従来品の約1.5倍に。窩壁への高いヌレ性はそのままとベトツキを低減、さらに操作性が向上しています。直接填入タイプながら、先端部をチップ式とすることにより、衛生面にも優れた製品構成となりました。

- 無味、無臭
- チップ式ワンペースタイル
- アイオノマーガラス配合により高い操作性
- 優れた封鎖性(弊社従来品の約1.5倍)
- 光照射20秒
- 高い硬化深度(9mm)
- 一環除去が可能



エバダイン[®] プラス

販売店情報 代理店/総代理店 21500R7700194000

セット 包装: 50人シリンジ 1本
 ネオブラックチップ(L) 15本
 標準価格 3,000円

ネオブラックチップ(L)30本入 標準価格 2,000円
 (一部送料別 代理店/総代理店 1381300154000115)



FM88266/ISO9001:2000
 MD81265/ISO13485:2003



NEO DENTAL CHEMICAL
 PRODUCTS CO., LTD.


Evadyne[®] Plus

エバダイン プラス 光重合 アイオノマーガラス配合 仮封材

医療機器認証番号 21500BZZ00194000

身体にやさしい

環境ホルモンの心配がないウレタン系レジンを使用。アイオノマーガラスのフィラーと相まって、高い生体親和性と物理特性を有します。

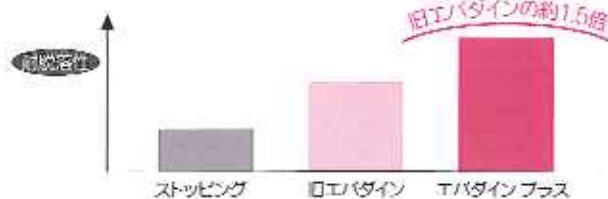

使い方がやさしい


シリンジからダイレクトにご使用いただける光重合タイプ、操作が簡単です。

基本操作フロー

シリンジから窩洞に流し込む
※窩洞は充分洗浄乾燥して下さい

濡らした綿球で表面を形成
※余剰部分はこの際拭き取る

光照射20秒

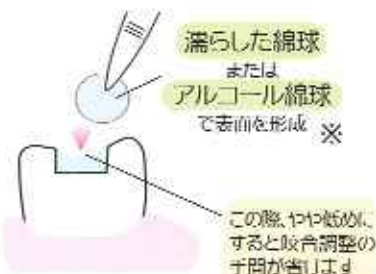


※表面にコーティング処理を施したレジン用
充填形成器でもご使用いただけます。

レジン系裏層材を使用した場合に水溶性分層材
ヤパンイ(別売)をお使い下さい。



一社代理店 株式会社ネオデンタル (03)X00154000032

高洞形態別充填方法

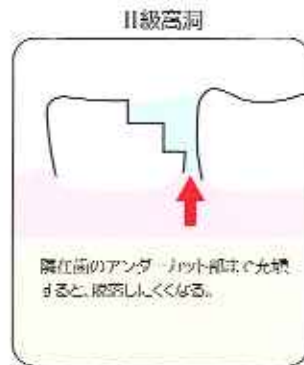

診療環境にやさしい

溶剤を使うタイプは、診療室の換気にも気を付けなければなりません。エバダインはにおいのない光照射タイプ。患者さんだけでなく診療環境にもやさしい仮封材です。



ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>

ネオ製薬工業株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

販売店名

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768